


VelaSmooth Pro<sup>®</sup>

Rimodellamento  
del Corpo.

Riduzione della  
Cellulite.

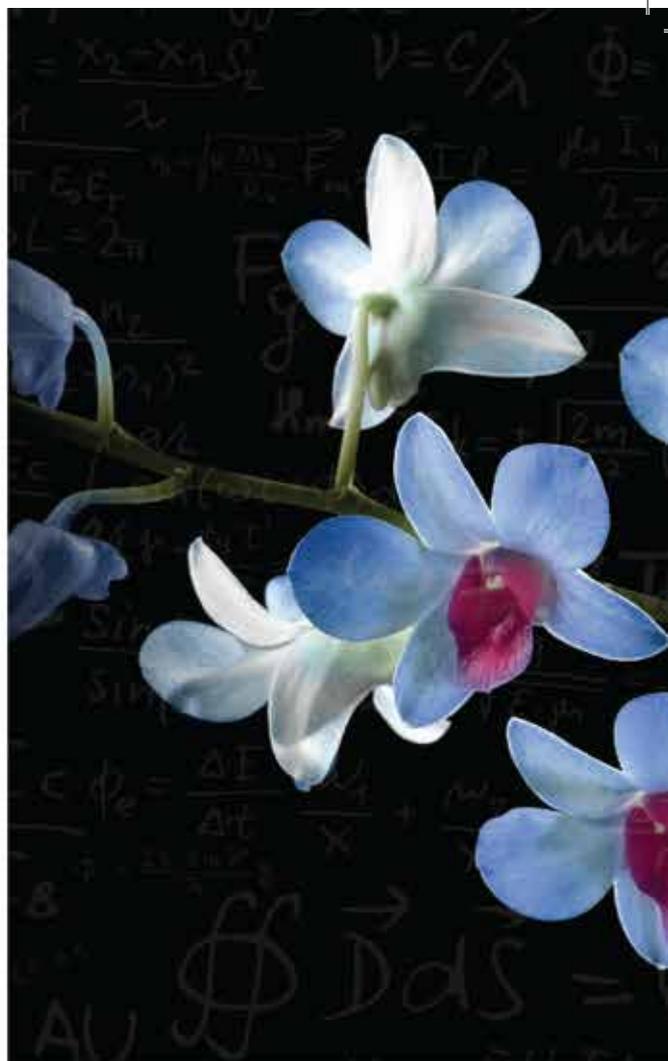

Science. Results. Trust.



SYNERON  CANDELA<sup>®</sup>

# VelaSmooth Pro®

Powered by elōs®

La famiglia di prodotti Vela ha rivoluzionato il mercato del rimodellamento del corpo realizzando il primo sistema non invasivo e clinicamente provato per un efficace trattamento della cellulite e per la riduzione della circonferenza. Il sistema VelaSmooth Pro® offre l'opportunità di rispondere alla sempre maggiore richiesta da parte dei clienti di trattamenti non chirurgici per il rimodellamento del corpo.

- Riduzione della circonferenza e della cellulite, miglioramento del turgore della pelle e rassodamento cutaneo grazie al rimodellamento del corpo
- La tecnologia brevettata elōs® offre risultati ottimali per il trattamento del tessuto cutaneo profondo e superficiale
- Procedura non invasiva, efficace e sicura, senza tempi di recupero
- Possibilità di trattare aree del corpo piccole e grandi, inclusi addome, glutei, cosce, braccia e fianchi
- Rapido recupero dell'investimento
- Approvato dalla comunità medica in tutto il mondo
- Oltre 10.000 persone vengono trattate ogni giorno con VelaSmooth®
- Semplice da utilizzare ed affiancabile ad altre metodiche

## La scienza straordinaria di VelaSmooth Pro®

Il sistema VelaSmooth Pro® offre la rivoluzionaria tecnologia elos® che combina quattro modalità di trattamento nello stesso manipolo:


- luce infrarossa (IR) che riscalda il tessuto fino a 2 mm di profondità;
- radiofrequenza (RF) che riscalda il tessuto fino a 20 mm di profondità;
- aspirazione che migliora la circolazione, consente di focalizzare in modo preciso l'effetto di riscaldamento e stimola i fibroblasti;
- manipolazione meccanica del tessuto che consente il drenaggio linfatico (dermico e ipodermico).

## Trattamento VelaSmooth Pro®:

- la combinazione sinergica delle energie IR e RF aumenta la diffusione dell'ossigeno intracellulare riscaldando il tessuto cutaneo;
- l'aspirazione e i rulli appositamente ideati manipolano e distendono la pelle, facilitando un'efficace e sicura emissione di energia.

## Risultati del trattamento VelaSmooth Pro®:

- aumento del metabolismo e lipolisi; aumento del drenaggio linfatico e riduzione o diminuzione delle dimensioni delle cellule adipose esistenti;
- tonificazione: aumento della produzione di collagene nelle zone dermiche ipodermiche grazie alla stimolazione dei fibroblasti;
- riduzione della circonferenza dell'area trattata e superficie della pelle dall'aspetto più levigato.

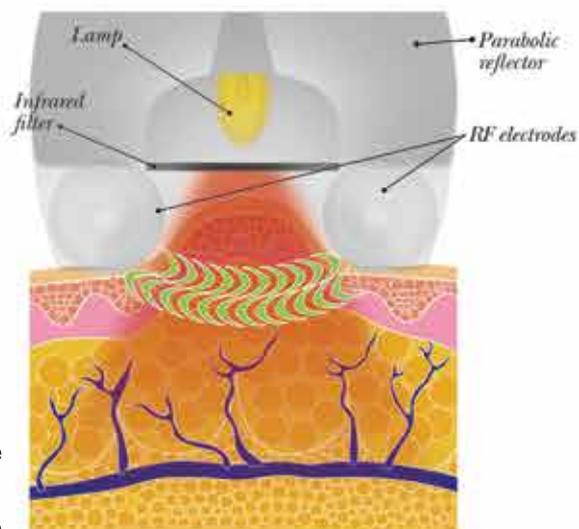

"Sono molto soddisfatta di VelaSmooth® e dei risultati che i miei clienti stanno osservando. Essi affermano che **la loro autostima è aumentata** e aspettano con impazienza il successivo appuntamento con VelaSmooth®. **Risultati eccellenti!**"

Cindy Ann Eckstein, CEO, Smooth Body Laser

Foto Tess Mauricio, M.D.



Prima

Dopo 11 Trattamenti

Foto R. Moore, M.D.



Prima

Dopo 14 Trattamenti

Foto J. Shaoul, M.D.



Prima

1 mese dopo 8 Trattamenti

Foto Gerry Boey, M.D.



Prima

6 settimane dopo 10 Trattamenti

#### Coperture Applicatori Sostituibili

- Risultati ottimali del trattamento.
- Mantenimento dell'igiene del trattamento.

#### Applicatore piccolo

Usato per le aree piccole, come fianchi, polpacci e braccia, e per consolidare i risultati dell'applicatore grande.

#### Terminale intelligente

Miglior controllo sul protocollo di trattamento dei clienti. Monitoraggio dell'attività e delle performance del sistema.

- Offre la diagnostica di assistenza per il sistema.

#### Applicatore grande

Usato per le aree grandi come cosce, addome e glutei.



Rimodellamento del Corpo • Riduzione della Cellulite

# VelaSmoothPro®

## Specifiche Tecniche Del Sistema VelaSmooth Pro®

Potenza di radiofrequenza	Fino a 35W
Potenza elettrica infrarossi	Fino a 35W
Spettro della luce	700 - 2000 nm
Aspirazione	Pulsata
Area di trattamento	Applicatore piccolo – 30mm x 30mm Applicatore grande – 40mm x 40mm
Peso	27kg
Dimensioni	36 x 55 x 80cm
Requisiti elettrici	100/115/230 VCA; 50/60 Hz; Monofase



Syneron Candela è leader globale nella realizzazione di apparecchiature mediche dedicate al mercato dell'estetica.

Siamo un'Azienda con due marchi distinti. Combiniamo livelli di innovazione, competenza e conoscenza del cliente, maggiore di qualsiasi altra compagine aziendale in questo settore industriale.

La nostra stabilità finanziaria, attraverso l'allineamento delle risorse comuni, ci consente di offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato, la migliore organizzazione di assistenza globale ed una rete capillare di distribuzione in tutto il mondo.

Insieme siamo più che mai sensibili ed attenti alle dinamiche di mercato. Sappiamo innovarci rapidamente con prodotti sicuri ed efficaci, in grado di coprire una varietà di esigenze e fasce di prezzo.

Siamo ancora più pronti ad anticipare le future tendenze del mercato, per supportare i nostri clienti e i loro pazienti. Attraverso le nuove tecnologie in fase di progettazione, siamo proiettati a mantenere la nostra Leadership globale e a supportarVi continuamente nello sviluppo della Vostra attività.

Syneron Candela dispone di una rete globale, costituita da distributori e filiali dirette.



### Partner per il successo

"Trova il Centro"  
più vicino a te  
su [syneron-candela.com](http://syneron-candela.com)

SYNERON  CANDELA®

[www.syneron-candela.it](http://www.syneron-candela.it) | [info@syneron-candela.it](mailto:info@syneron-candela.it)

This brochure is not intended for the U.S. market.

©2008. All rights reserved. Syneron, the Syneron logo, VelaSmooth, VelaSmooth Pro and elos are trademarks of Syneron Medical Ltd. and may be registered in certain jurisdictions. elos (electro-optical synergy) is a proprietary technology of Syneron Medical. PB73103EN 